

Accu-Chek® FlexLink



Confort et flexibilité adapté à votre corps.

Le set d'infusion Accu-Chek FlexLink est une façon simple et pratique pour les personnes de se connecter à leur pompe à insuline, quel que soit leur âge et leur niveau d'expérience. L'insertion manuelle est simplifiée grâce à un support amovible. Cependant, le dispositif d'aide à l'insertion Accu-Chek® LinkAssist est le choix idéal si vous préférez insérer le set automatiquement. Il facilite la pose de l'Accu-Chek® FlexLink et veille à ce que ce dernier soit inséré rapidement et de façon quasiment indolore.



- Angle d'insertion de 90°.
- Canule souple s'ajustant aux mouvements naturels du corps pour un confort de port optimal.
- Connection et déconnection facile au niveau du dispositif cutané.
- Le support amovible bleu permet une manipulation aisée et facilite l'insertion manuelle.



Facile à manipuler pour ceux qui préfèrent l'insertion manuelle.



Pour ceux qui préfèrent l'insertion automatique, l'Accu-Chek LinkAssist offre une insertion rapide, pratique et confortable.



Le support plat et aux bords arrondis permet d'éviter les risques d'accrochages et de désinsertion.

Accu-Chek® LinkAssist

Le dispositif d'insertion automatique.

Le dispositif d'insertion Accu-Chek® LinkAssist est destiné à être utilisé avec le set d'infusion Accu-Chek® FlexLink. Il permet de réussir plus facilement l'insertion et de façon quasiment indolore.

- Insertion automatique rapide.
- Permet l'insertion dans des zones difficiles d'accès.
- Cran de sécurité empêchant l'activation accidentelle du système.



Collaboration pour un traitement optimal.



Les sets d'infusion Accu-Chek® sont le complément idéal du système Accu-Chek® Combo, avec son lecteur de glycémie 'intelligent' et sa pompe à insuline fiable. Utilisés ensemble, ils offrent de nombreux bénéfices, tels que la possibilité de contrôler la pompe à insuline avec le lecteur et une sécurité maximale lors du changement du set d'infusion. Pour une insulinothérapie par pompe intuitive, instantanée, discrète et en toute sécurité, utilisez Accu-Chek® Combo avec un set d'infusion Accu-Chek®.

Découvrez un monde de possibilités.

Pour en savoir plus sur les produits Accu-Chek® et la façon dont ils interagissent afin d'optimiser le traitement du diabète, surfez sur www.accu-chek.be ou appelez l'Accu-Chek Service au numéro gratuit:

0800 93 626

ACCUCHEK, ACCUCHEK FLEXLINK, ACCUCHEK TENDERLINK, ACCUCHEK RAPID-D LINK, ACCUCHEK LINKASSIST, ACCUCHEK AVIVA COMBO, ACCUCHEK SPIRIT COMBO et COMBO sont des marques déposées du groupe Roche © 2013 Roche Diagnostics. Le nom de marque et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Roche est régie par une licence.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
B-1800 VILVOORDE




ACCUCHEK®

Sets d'infusion ACCU-CHEK®

Roche

Les sets d'infusion Accu-Chek® Votre connexion personnelle.

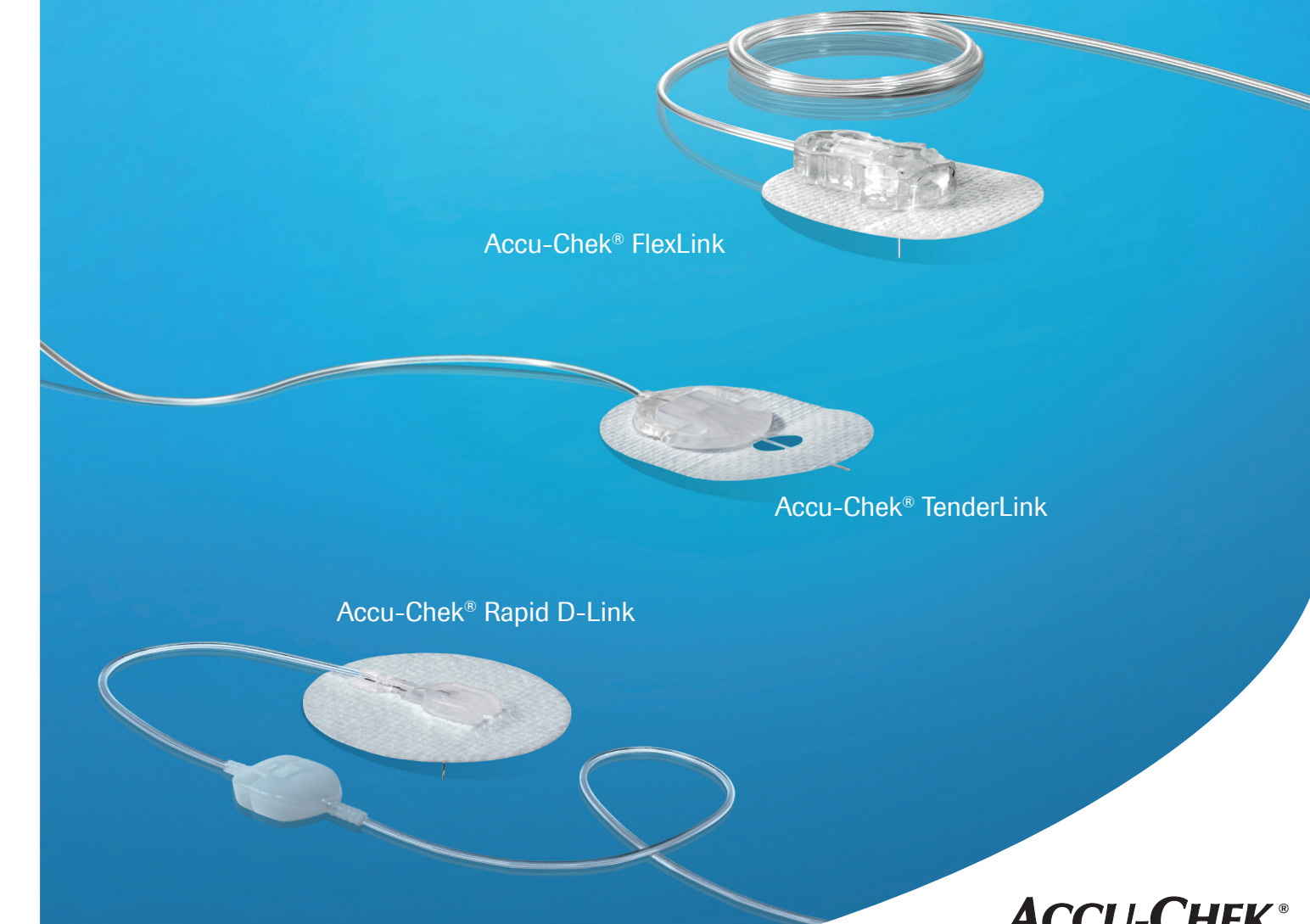

Accu-Chek® FlexLink


Accu-Chek® TenderLink

Accu-Chek® Rapid D-Link

ACCUCHEK®

Sélectionnez l'endroit. Alternez.

Il est généralement recommandé d'insérer les sets d'infusion au niveau de l'abdomen, cette région ayant en effet le taux d'absorption le plus constant. D'autres endroits peuvent être utilisés. Demandez conseil à votre professionnel de la santé.

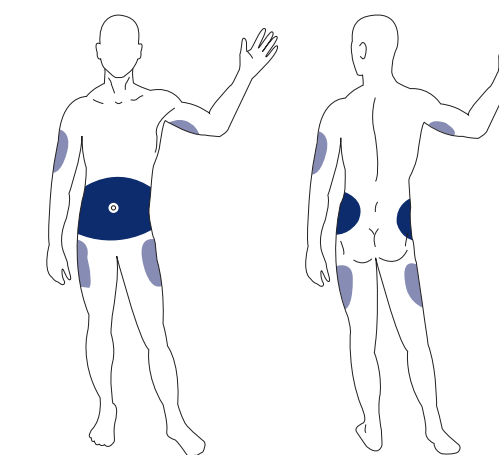


Hanches et fesses — absorption plus lente qu'au niveau de l'abdomen. Sites appropriés aux personnes actives.


Extérieur des cuisses — absorption plus lente qu'au niveau de l'abdomen, mais pouvant être accrue par de l'activité physique.

Arrière des bras — absorption plus lente qu'au niveau de l'abdomen, mais pouvant être accrue par de l'activité physique.

- Sites d'infusion recommandés
- Sites d'infusion possibles

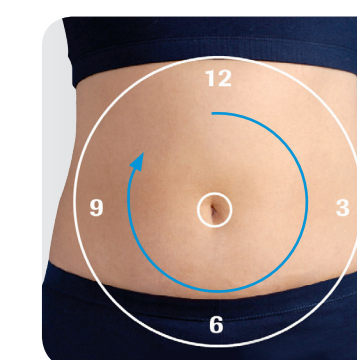

Méthode de l'horloge

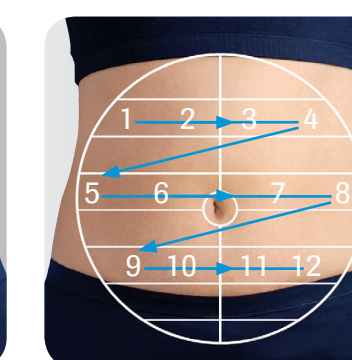

Méthode du Zigzag

Alterner le site d'infusion favorise la cicatrisation des endroits qui viennent d'être utilisés de façon à assurer leur disponibilité future. Les nouveaux sites devraient être distants d'au moins 5 cm du nombril.

Un large choix pour plus de bénéfices.

Le tableau ci-dessous dresse un aperçu du large éventail de sets d'infusion Accu-Chek® disponibles et de leurs principales caractéristiques

	Accu-Chek® FlexLink	Accu-Chek® TenderLink	Accu-Chek® Rapid-D Link
Canule	Canule souple de 0.50 mm (= 25 G)	Canule souple de 0.50 mm (= 25 G)	Aiguille ultrafine en acier de 0.36 mm (= 28 G)
Angle d'insertion	90°	20-45°	90°
Longueur de la canule	6, 8, 10 mm	13, 17 mm	6, 8, 10 mm
Longueur de la tubulure	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm
Possibilité de déconnexion	Oui	Oui	Oui

Accu-Chek® Rapid-D Link



Simplicité d'utilisation, discrétion de port.

Ces sets d'infusion ont une aiguille ultrafine en acier que l'on sent à peine lors de l'insertion.



Avantages:

- Angle d'insertion de 90°.
- Aiguille en acier chirurgical inoxydable.
- Aiguille ultrafine de 0.36 mm.
- Design plat et discret. Seulement 2.7 mm de hauteur.



Accu-Chek® TenderLink



Liberté maximale pour un style de vie actif.

Grâce à sa canule souple, l'Accu-Chek® TenderLink est adapté aux personnes ayant une vie active et à celles ayant moins de tissu sous-cutané.

L'insertion se faisant selon un angle, l'utilisateur contrôle mieux la profondeur et la vitesse d'insertion. La canule souple lui garantit également une grande liberté de mouvements, par exemple lors d'activités sportives.



Avantages:

- Angle d'insertion de 20°- 45°.
- Connexion et déconnexion faciles au niveau du site d'insertion.
- Canule souple s'ajustant aux mouvements naturels du corps.



Une solution pour chacun. La connexion vers la flexibilité.

Lors du choix d'un set d'infusion, l'âge, la corpulence et le type d'activités jouent un rôle important. Vos attentes et préférences quant à la méthode d'insertion sont également des facteurs importants car elles peuvent varier très fort d'une personne à l'autre.


Les sets d'infusion Accu-Chek® sont conçus pour votre confort. Ils sont pourvus de nombreuses propriétés novatrices qui facilitent le choix du bon set d'infusion et assurent sécurité, flexibilité et facilité d'utilisation. Ils conviennent à chaque style de vie.

Signification des symboles.

Les symboles ci-dessous vous aideront à reconnaître rapidement les principales caractéristiques des sets d'infusion



Angle d'insertion de 90°

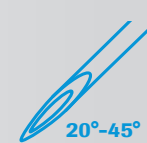

Angle d'insertion de 20°- 45°



Possibilité de déconnecter la tubulure du dispositif cutané



Aiguille en acier



Canule souple

